

Mi Electric Toothbrush

Uživatelský manuál



OPATŘENÍ

Během prvního užití můžete cítit svědění nebo slabé krvácení. To je proto, že dásně nejsou zvyklé na toto účinné čištění. Doporučuje se používat oblíbený režim zubního kartáčku. Tento symptom obvykle zmizí během 1-2 týdnů. Pokud přetrvává po 2 týdnech, přestaňte používat tento zubní kartáček a poraďte se se zubním lékařem.

Uživatelé podstupující ortodontcii, zubní opravy nebo mají dentální implantát by měli kartáček používat pod vedením zubních lékařů. Kartáček splňuje nejvyšší bezpečnostní normy elektrických zařízení. Pokud máte obavy kolem kardiostimulátoru, poraďte se se lékařem. Tento výrobek je určen k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k jiným účelům. Nedávejte dokovací stanici do vody ani jiné kapaliny. Během čištění odpojte od nabíječky. Zdroj udržujte v suchu. Nerozebírejte. Nepoužívejte při poškození. Nepoužívejte během nabíjení, sprchování nebo koupání. Nenechávejte při vysokých teplotách. Nenamotávejte kabel kolem kartáčku. Nepokládejte na dokovací stanici žádné předměty.

OPATŘENÍ

Během prvního užití můžete cítit svědění nebo slabé krvácení. To je proto, že dásně nejsou zvyklé na toto účinné čištění. Doporučuje se používat oblíbený režim zubního kartáčku. Tento symptom obvykle zmizí během 1-2 týdnů. Pokud přetrvává po 2 týdnech, přestaňte používat tento zubní kartáček a poraďte se se zubním lékařem.


Uživatelé podstupující ortodontcii, zubní opravy nebo mají dentální implantát by měli kartáček používat pod vedením zubních lékařů. Kartáček splňuje nejvyšší bezpečnostní normy elektrických zařízení. Pokud máte obavy kolem kardiostimulátoru, poraďte se se lékařem. Tento výrobek je určen k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k jiným účelům. Nedávejte dokovací stanici do vody ani jiné kapaliny. Během čištění odpojte od nabíječky. Zdroj udržujte v suchu. Nerozebírejte. Nepoužívejte při poškození. Nepoužívejte během nabíjení, sprchování nebo koupání. Nenechávejte při vysokých teplotách. Nenamotávejte kabel kolem kartáčku. Nepokládejte na dokovací stanici žádné předměty.

Mi Electric Toothbrush


Uživatelský manuál



POPIS PRODUKTU

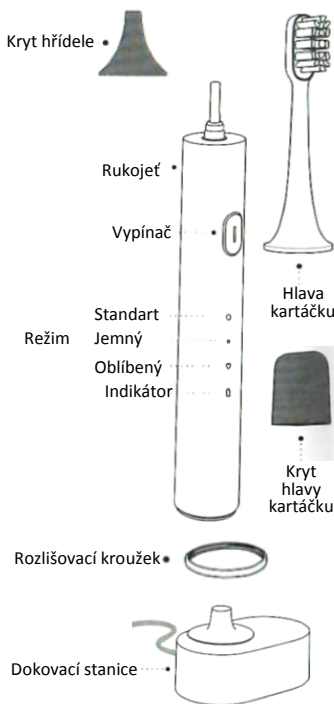


POPIS PRODUKTU

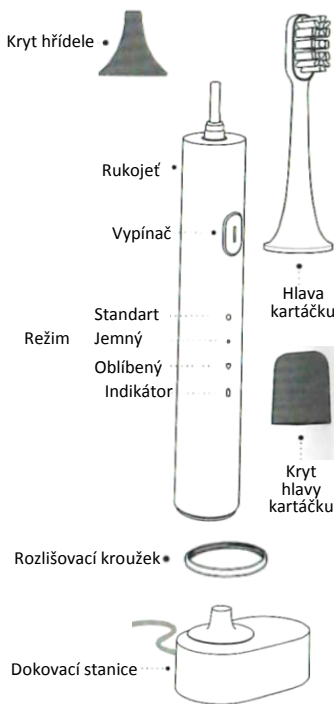

POUŽITÍ

A. Instalace hlavy kartáčku


Upevněte hlavu zubního kartáčku na rukojeť zubního kartáčku a zajistěte určitou mezeru mezi oběma částmi. (Mezera zajistí, aby se hlava zubního kartáčku při vysokofrekvenčních vibračních nedotýkala rukojeti zubního kartáčku.)

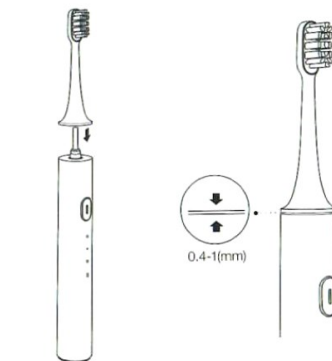

POUŽITÍ

A. Instalace hlavy kartáčku

Upevněte hlavu zubního kartáčku na rukojeť zubního kartáčku a zajistěte určitou mezeru mezi oběma částmi. (Mezera zajistí, aby se hlava zubního kartáčku při vysokofrekvenčních vibračních nedotýkala rukojeti zubního kartáčku.)

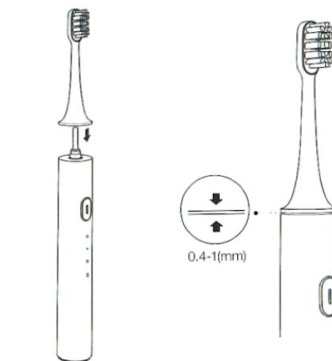


B. Instalace a výměna rozlišovacího kroužku

Vyberte kroužek libovolné barvy.


Odstraňte barevný kroužek: držte zubní kartáček levou rukou, zatlačte palcem na vzduchový otvor v dolní části a vložte nehet do mezery mezi barevným kroužkem a rukojetí, zatlačte lehce barevný kroužek směrem nahoru a odstraňte jej.

Instalace barevného kroužku: Stisknutím barevného kroužku dolů jej nainstalujte.

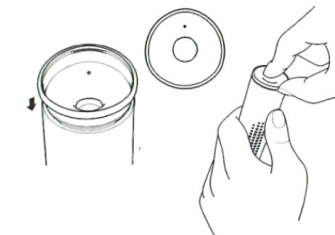

C. Vytačte zubní pastu

Navlhčete hlavu kartáčku a vytačte na ní odpovídající množství zubní pasty.

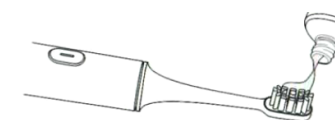


B. Instalace a výměna rozlišovacího kroužku

Vyberte kroužek libovolné barvy.


Odstraňte barevný kroužek: držte zubní kartáček levou rukou, zatlačte palcem na vzduchový otvor v dolní části a vložte nehet do mezery mezi barevným kroužkem a rukojetí, zatlačte lehce barevný kroužek směrem nahoru a odstraňte jej.

Instalace barevného kroužku: Stisknutím barevného kroužku dolů jej nainstalujte.

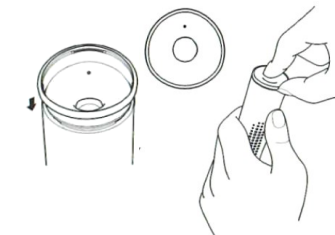


C. Vytačte zubní pastu

Navlhčete hlavu kartáčku a vytačte na ní odpovídající množství zubní pasty.

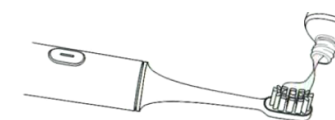

D. Vyberte režim

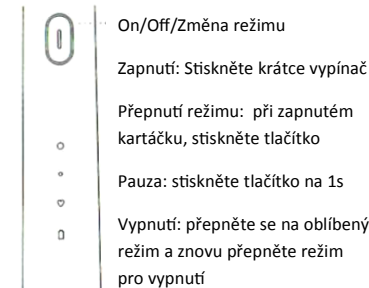

On/Off/Změna režimu

Zapnutí: Stiskněte krátce vypínač

Přepnutí režimu: při zapnutém kartáčku, stiskněte tlačítko

Pauza: stiskněte tlačítko na 1s

Vypnutí: přepněte se na oblíbený režim a znovu přepněte režim pro vypnutí

Za určitých okolností může být třeba tovární nastavení, které provedete stiskem tlačítka na 12s (chyby v datech, synchronizace se smartphonem pomocí bluetooth)

E. Správné čištění zubů

pomalou přesuňte kartáček na zuby a držte v úhlu 45°.


Během čištění můžete stisknout tlačítko a volně přepínat režimy čištění.

Během čištění se kartáček krátce zastaví po každých 30 sekundách, abyste mohli změnit polohu kartáčku.

Pokud se zubní kartáček nepozastaví, automaticky se vypne po ukončení režimu čištění (režim čištění lze nastavit v aplikaci).



D. Vyberte režim

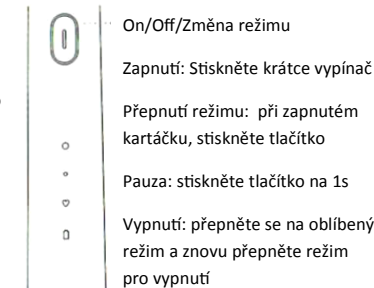

On/Off/Změna režimu

Zapnutí: Stiskněte krátce vypínač

Přepnutí režimu: při zapnutém kartáčku, stiskněte tlačítko

Pauza: stiskněte tlačítko na 1s

Vypnutí: přepněte se na oblíbený režim a znovu přepněte režim pro vypnutí

Za určitých okolností může být třeba tovární nastavení, které provedete stiskem tlačítka na 12s (chyby v datech, synchronizace se smartphonem pomocí bluetooth)

E. Správné čištění zubů

pomalou přesuňte kartáček na zuby a držte v úhlu 45°.

Během čištění můžete stisknout tlačítko a volně přepínat režimy čištění.

Během čištění se kartáček krátce zastaví po každých 30 sekundách, abyste mohli změnit polohu kartáčku.

Pokud se zubní kartáček nepozastaví, automaticky se vypne po ukončení režimu čištění (režim čištění lze nastavit v aplikaci).



F. Čištění hlavy kartáčku

Po čištění opláchněte hlavu zubního kartáčku pod tekoucí vodou.


Po čištění zakryjte hlavu zubního kartáčku ochranným krytem, abyste udrželi hlavu zubního kartáčku čistou a hygienickou.



FDA testování bezpečnosti

Kopolymery akrylonitrilu a pryskyřice byly testovány na shodu s U.S.F.D.A C.F.R.21 Part 180.22 & 181.32;

Nylonové pryskyřice byly testovány na dodržení U.S.F.D.A C.F.R.21 Part 177.1500.

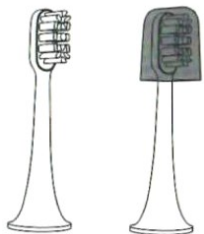

* je doporučeno měnit hlavu kartáčku každé 3 měsíce

F. Čištění hlavy kartáčku

Po čištění opláchněte hlavu zubního kartáčku pod tekoucí vodou.


Po čištění zakryjte hlavu zubního kartáčku ochranným krytem, abyste udrželi hlavu zubního kartáčku čistou a hygienickou.



FDA testování bezpečnosti

Kopolymery akrylonitrilu a pryskyřice byly testovány na shodu s U.S.F.D.A C.F.R.21 Part 180.22 & 181.32;

Nylonové pryskyřice byly testovány na dodržení U.S.F.D.A C.F.R.21 Part 177.1500.

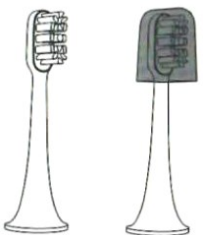

* je doporučeno měnit hlavu kartáčku každé 3 měsíce

G. Nabíjejte kartáček pravidelně

Po nabití v doku indikátor napájení zubního kartáčku rozdílně svítí:


100%: stabilní modrozelená

100% -60%: bliká modrozelená

60% -20%: blikající oranžová

<20%: bliká červeně

Nabíjení trvá déle než 12 hodin, než se baterie úplně nabije, když je baterie vybitá (indikátor baterie bliká třikrát a připojení Bluetooth je udržováno. Po odstranění připojení Bluetooth se obnoví nabíjení.

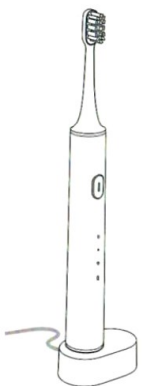

- Bluetooth connected: blue
- 100%: steady blue-green
- 100%-60%: blinking blue-green
- 60%-20%: blinking orange
- 20%-0%: blinking red

G. Nabíjejte kartáček pravidelně

Po nabití v doku indikátor napájení zubního kartáčku rozdílně svítí:


100%: stabilní modrozelená

100% -60%: bliká modrozelená

60% -20%: blikající oranžová

<20%: bliká červeně

Nabíjení trvá déle než 12 hodin, než se baterie úplně nabije, když je baterie vybitá (indikátor baterie bliká třikrát a připojení Bluetooth je udržováno. Po odstranění připojení Bluetooth se obnoví nabíjení.

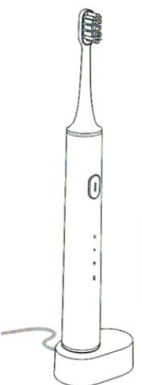

- Bluetooth connected: blue
- 100%: steady blue-green
- 100%-60%: blinking blue-green
- 60%-20%: blinking orange
- 20%-0%: blinking red

STAŽENÍ MI HOME APP

A. Rychlé nastavení

Ovládejte zařízení a komunikujte s jinými inteligentními domácími zařízeními v aplikaci Mi Home.

1. Stahněte a nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo najděte Mi Home v obchodu aplikací.



2. Přidejte zařízení

Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ vpravo nahoře a vyberte Vaše zařízení.

STAŽENÍ MI HOME APP

A. Rychlé nastavení

Ovládejte zařízení a komunikujte s jinými inteligentními domácími zařízeními v aplikaci Mi Home.

1. Stahněte a nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo najděte Mi Home v obchodu aplikací.



2. Přidejte zařízení

Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ vpravo nahoře a vyberte Vaše zařízení.

B. Spojení s aplikací Mi Home

1. Zapněte bluetooth ve Vašem telefonu a mějte kartáček v jeho blízkosti.

2. Otevřete aplikaci Mi Home a klikněte na „+“ vpravo nahoře.

3. Najděte „Mi Electric Toothbrush“ a vstupte na spojovací stránku.

4. Stiskněte a držte tlačítko na kartáčku po dobu 3s, Bluetooth indikátor třikrát blikne a zůstane svítit a zhasne jakmile se spáruje s telefonem.

*Kartáček není během spojení s bluetooth funkční a naopak pokud si čistíte zuby, nelze spárovat krze bluetooth.

C. Datová synchronizace

Stahněte aplikaci Mi Home, registrujte Mi account a přihlaste se v aplikaci. Vstupte do „My devices“ a klikněte na zařízení.



Umístěte kartáček k telefonu - Sjedďte dolů pro Synchronizaci je kompletní

B. Spojení s aplikací Mi Home

1. Zapněte bluetooth ve Vašem telefonu a mějte kartáček v jeho blízkosti.

2. Otevřete aplikaci Mi Home a klikněte na „+“ vpravo nahoře.

3. Najděte „Mi Electric Toothbrush“ a vstupte na spojovací stránku.

4. Stiskněte a držte tlačítko na kartáčku po dobu 3s, Bluetooth indikátor třikrát blikne a zůstane svítit a zhasne jakmile se spáruje s telefonem.

*Kartáček není během spojení s bluetooth funkční a naopak pokud si čistíte zuby, nelze spárovat krze bluetooth.

C. Datová synchronizace

Stahněte aplikaci Mi Home, registrujte Mi account a přihlaste se v aplikaci. Vstupte do „My devices“ a klikněte na zařízení.



Umístěte kartáček k telefonu - Sjedďte dolů pro Synchronizaci je kompletní

ŘEŠENÍ

Problém	Příčina
Zařízení nejde zapnout	Je vybité, je spojeno s bluetooth, baterie je slabá
Zubní kartáček nejde nainstalovat na hřidel	V otvoru je nějaký cizí předmět, zaschlá pasta, neoriginální hlava.
Rychlé vybíjení	Zařízení je dlouho v režimu bluetooth, je často používáno.
Vibrace kartáčku jsou slabé	Špatně nainstalovaná hlava, cizí předměty
Aplikace se ke kartáčku nepřipojí	Kartáček je zapnutý

ŘEŠENÍ

Problém	Příčina
Zařízení nejde zapnout	Je vybité, je spojeno s bluetooth, baterie je slabá
Zubní kartáček nejde nainstalovat na hřidel	V otvoru je nějaký cizí předmět, zaschlá pasta, neoriginální hlava.
Rychlé vybíjení	Zařízení je dlouho v režimu bluetooth, je často používáno.
Vibrace kartáčku jsou slabé	Špatně nainstalovaná hlava, cizí předměty
Aplikace se ke kartáčku nepřipojí	Kartáček je zapnutý